




z myślą o codzienności osób żyjących ze stomią

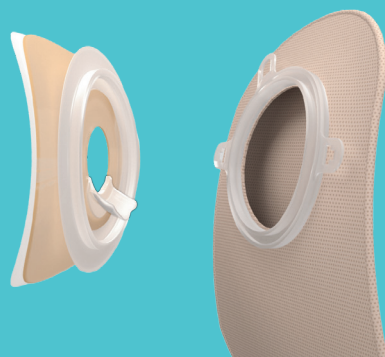

Ostoform to firma, której celem jest wspieranie osób ze stomią w codziennym funkcjonowaniu. Tworzymy rozwiązania oparte na realnych potrzebach użytkowników – dzięki połączeniu wiedzy klinicznej, doświadczeń osób ze stomią i nowoczesnych technologii.

Nasze działania koncentrują się na komforcie, bezpieczeństwie i poprawie jakości życia osób korzystających z wyrobów stomijnych. Współpracujemy z pielęgniarkami stomijnymi, lekarzami oraz środowiskiem użytkowników, aby oferować produkty funkcjonalne, przemyślane i zgodne z wymaganiami systemów ochrony zdrowia.

W Polsce Ostoform oferuje wyroby stomijne z systemem **FLOWASSIST**, dostępne w ramach refundacji.

FLOWASSIST – technologia ukierunkowanego przepływu

FLOWASSIST to opracowane przez Ostoform rozwiązanie technologiczne stosowane w pierścieniach lub płytkach stomijnych. Jego celem jest wspomaganie zarządzania przepływem treści jelitowej w okolicy stomii.

Centralnym elementem tej technologii jest profilowana wypustka, która pomaga kierować treść jelitową bezpośrednio do worka stomijnego. Taka konstrukcja może przyczynić się do wyeliminowania podciekania treści pod płytkę stomijną, a tym samym zmniejszenia wilgoci w obrębie przylepca, co jest szczególnie istotne dla ochrony skóry.



Pierścień z technologią **FLOWASSIST** został zaprojektowany tak, aby elastycznie dopasowywał się do ruchów ciała, wspierając szczelność i komfort podczas codziennej aktywności.

Rozwiązanie powstało w oparciu o doświadczenia osób żyjących ze stomią oraz współpracę z personelem medycznym. Stanowi odpowiedź na potrzeby związane z ochroną skóry i stabilnością sprzętu stomijnego.



Produkty z technologią **FLOWASSIST™** zostały zaprojektowane, aby:

- Pomagać w zapobieganiu podciekania
- Chronić skórę wokół stomii
- Zapewniać dłuższy czas noszenia sprzętu
- Kierować wypróżnienie bezpośrednio do worka stomijnego, z dala od skóry

Dzięki tym cechom, produkty **Ostoform** mogą znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników sprzętu stomijnego.

NASZE PRODUKTY REKOMENDOWANE SĄ DLA UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU STOMIJNEGO, KTÓRZY:





OFA-SML

Pierścień uszczelniający

Pierścień stomijny z wypustką odporną na wilgoć, która kieruje treść jelitową prosto do worka.



OFA-FB57

Płaska płytka stomijna do systemu dwuczęściowego

Wbudowany pierścień kieruje treść jelitową bezpośrednio do worka stomijnego.

OFA-DP57

Worek stomijny do ileostomii w systemie dwuczęściowym

Pasuje do płytki wyposażonej we wbudowany system **FLOWASSIST**



OFA-UP57


Worek urostomijny w systemie dwuczęściowym

Pasuje do płytki wyposażonej we wbudowany system **FLOWASSIST**

A1-BSFMz

Półpierścień CREST formowalna bariera

Wspomaga i zapewnia dopasowanie do unikalnych kształtów stomii.

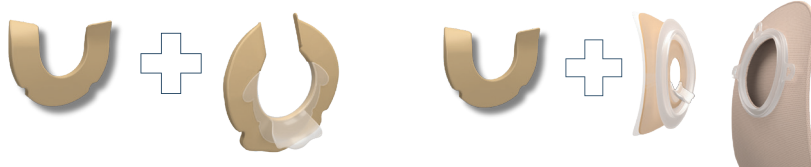

Półpierścień CREST można stosować jako produkt uzupełniający do produktu **FLOWASSIST** oraz z dowolnym używanym sprzętem stomijnym innej marki.

Tabela rozmiarów

Kod produktu	Opis	Wielkość	Rozmiar stomii
OFA-FB57-S	Płaska płytki z systemem FLOWASSIST	mała	15-23 mm
OFA-FB57-M		średnia	23-30 mm
OFA-FB57-L		duża	30-40 mm
OFA-DP57	Worek odpuszczalny w systemie 2-częściowym		
OFA-UP57	Worek urostomijny w systemie 2-częściowym		
A1-BSFMz	Półpierścień CREST		
OFA-S	Pierścień z wypustką FLOWASSIST	mały	15-23 mm
OFA-M		średni	23-30 mm
OFA-L		duży	30-40 mm



**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.**

Jak to działa:

Nieabsorbująca osłona **FLOWASSIST** chronią skórę i przylepieć płytki stomijnej przed kontaktem z treścią ze jelitową.

Miękka, elastyczna wypustka **FLOWASSIST** odprowadza treść jelitową z dala od skóry, kierując ją bezpośrednio do worka.

Płytkę stomijną można obracać i ustawić tak, aby wypustka była dopasowana do indywidualnego położenia stomii.

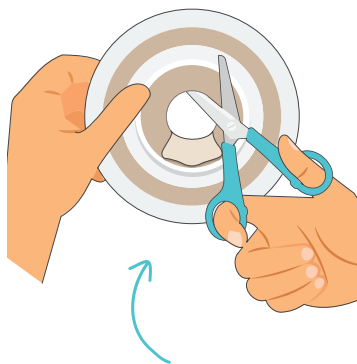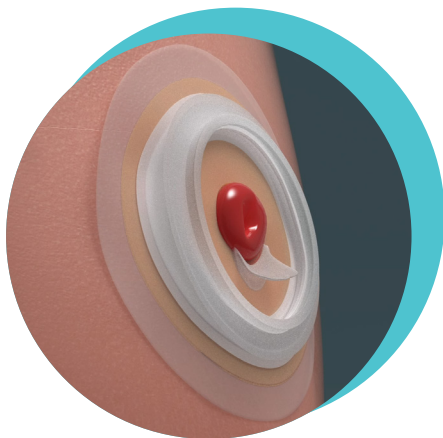



Używając nożyczek, wytnij otwór w płytce stomijnej tak, aby dopasować go do rozmiaru stomii. Pamiętaj o regularnym mierzeniu stomii.

OSTRZEŻENIE:


Nie przecinaj wypustki FLOWASSIST!




Instrukcja zakładania pierścienia FLOWASSIST

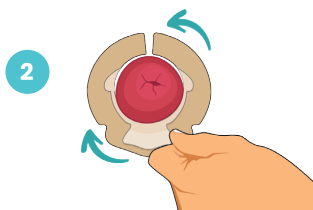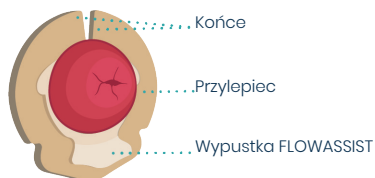


Ustaw wypustkę FLOWASSIST poniżej stomii lub obróć tak, aby zrównała się z otworem stomii. Możesz przytrzymać wypustkę tak, aby ułatwić prawidłowe ułożenie pierścienia uszczelniającego.

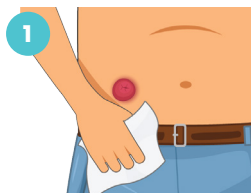


Umyj ręce i upewnij się, że skóra wokół stomii jest czysta i sucha. Ogrzej pierścień uszczelniający w dłoniach przez 30 sekund, przed założeniem usuń papierową osłonę.

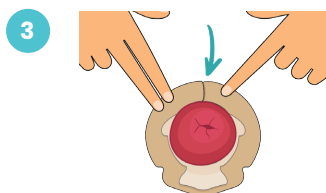


Owiń końce przylepca wokół stomii, upewniając się, że końce zachodzą na siebie.

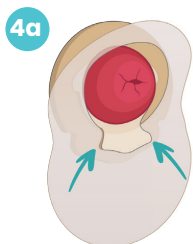

Przygotuj otwór płytki stomijnej zgodnie z wytycznymi producenta. Upewnij się, że wypustka FLOWASSIST znajduje się w całości wewnątrz otworu worka.

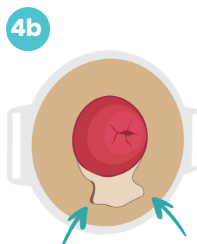

Nałóż płytkę stomijną (patrz Rysunek 4a) na wcześniej założony pierścień z wypustką FLOWASSIST. Upewnij się, że wypustka jest umieszczona centralnie wewnątrz worka stomijnego.

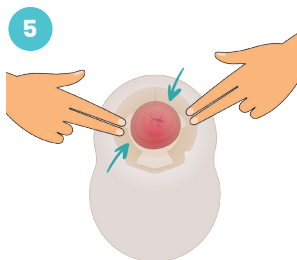

Lekko uciśnij płytkę, aby zapewnić pewne przyleganie.



Jeśli otwór w płytce stomijnej został nieprawidłowo docięty (jest zbyt duży) lub pierścień uszczelniający został założony zbyt daleko, co może spowodować podciekanie treści jelitowej pod płytkę, możesz to skorygować na kilka sposobów:

- **Dopasowanie pierścienia:** Należy dopasować pierścień, szczelnie otulając nim stomię, co pomoże uszczelnić przestrzeń i zapobiec przeciekom.
- **Uzupełnienie pastą stomijną:** Ewentualnie, braki w uszczelnieniu (szczególnie w przypadku nierównej skóry lub drobnych szczelin) można uzupełnić specjalną pastą stomijną. Pamiętaj, aby nałożyć ją w niewielkiej ilości tam, gdzie wymagane jest dodatkowe wypełnienie.

Sieć sklepów medycznych Med4Me oferuje szeroki asortyment wyrobów ortopedycznych, środków chłonnych, artykułów dla Amazonek i innych. W każdej z naszych placówek znajdziesz Państwo, oprócz wysokiej jakości wyrobów medycznych, profesjonalne wsparcie i zrozumienie. **Med4Me jest szczególnie dedykowane stomikom!** Jesteś stomikiem – przyjdź do nas, a przekonasz się, że dzięki właściwemu doborowi sprzętu stomijnego, którego szeroki wybór wszystkich marek oferujemy, będziesz cieszyć się każdą chwilą życia!

GWARANTUJEMY:



pełen asortyment
stomijny dający pewność
kompleksowego
zaopatrzenia każdego
rodzaju stomii



szeroki wybór marek obecnych
na polskim rynku dostawców
sprzętu stomijnego z możliwością
doboru różnego sprzętu w ramach
jednego zlecenia



wsparcie profesjonalnego
personelu podczas doboru
sprzętu stomijnego



możliwość odbioru
na miejscu w sieci naszych
sklepów lub bezpłatną
dostawę przesyłką kurierską
na wskazany adres

Skontaktuj się z nami **800 120 130** lub przyjdź:

Gdańsk, ul.Rajska 14a, tel. 880 900 177

Gorzów Wilk., ul.Sikorskiego 13/14, tel. 795 126 660

Gostynin, ul. Wojska Polskiego 31, tel. 697 904 918

Katowice, ul. Korfańskiego 2, tel. 697 904 321

Koszalin, Plac Gwiazdzysty 1, tel. 697 793 977

Lublin, ul.Północna 6, tel 661 113 540

Łódź, ul. Piotrkowska 317, tel. 601 530 350

Piła, O.M.M. Kolbe 3A/U4, tel. 723 978 990

Słupsk, ul. Leszczyńska 20, tel. tel. 608 303 454

Warszawa, ul.Tytusa Chałubińskiego 8, tel. 665 788 008

Wrocław, Plac Legionów 15, tel. 668 645 420

www.med4me.pl

**STOMA
LIFE**

Fundacja STOMALife otacza opieką wszystkie osoby ze stomią i ich bliskich. Służy pomocą wówczas, gdy chcą zasięgnąć porady pielęgniarki stomijnej, psychologa, specjalisty od doboru sprzętu stomijnego lub po prostu szukają Bratniej Duszy.

Skontaktuj się z nami: infolinia 800 633 463, biuro@stomalife.pl

Możesz wesprzeć nasze działania: nr konta **46 1090 1883 0000 0001 5078 2361**

Dołącz do nas:



Stomia Symbol Zwycięstwa –
grupa pomocy i wsparcia

Polub nas:



Fundacja
STOMALife



Fundacja
STOMALife



Fundacja
STOMALife

www.stomalife.pl



Dowiedz się więcej:

www.ostoform.pl

Infolinia: 800 120 130, info@ostoform.pl



Dystrybutor: **Med4me Sp. z o.o.**

ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

Infolinia: 800 120 130, biuro@med4me.pl